

ПАСПОРТ

Чехол-куртка для инв. коляски, демисезонный, КОС®

1 Основные сведения об изделии

1.1 Назначение

Изделие предназначено для прогулок людям, передвигающимся на инвалидных колясках. Утепленный мешок дополняет или полностью заменяет верхнюю одежду, позволяя людям с ограниченными возможностями находиться на свежем воздухе в дождливую погоду и холодное время года. Он защищает от ветра, дождя и мокрого снега.

1.2 Технические характеристики изделия

Размер	M 155-170	L 155-170	XL 155-170	2XL 155-170	M 170-185	L 170-185	XL 170-185	2XL 170-185
Соответствие российскому размеру	44-48	50-54	56-60	62-66	44-48	50-54	56-60	62-66
Артикул	ADW034R_LBM	ADW034R_LBL	ADW034R_LBXL	ADW043R_LB2XL	ADW037R_LBM	ADW037R_LBL	ADW037R_LBXL	ADW044R_LB2XL
								
Цвет	Голубой							
	ADW034R_RDM	ADW034R_RDL	ADW034R_RDXL	ADW043R_RD2XL	ADW037R_RDM	ADW037R_RDL	ADW037R_RDXL	ADW044R_RD2XL
								
	Бордо							
Материалы	100% пэ							

2 Комплект поставки

- чехол-куртка для инв. коляски, демисезонный – 1 шт. (размер и ростовка изделия отмечены в п.1.2),
- паспорт изделия с инструкцией по эксплуатации – 1 шт.

3 Упаковка

Изделие упаковывается в индивидуальный полиэтиленовый пакет по ГОСТ 12302. Далее изделие в индивидуальной упаковке помещается в транспортную тару — ящики из гофрированного картона по ГОСТ 9142.

4 Условия транспортировки и хранения

4.1 Транспортирование и хранение изделия осуществляется в соответствии с требованиями ГОСТ 10581 (раздел 3).

4.2 Изделие в упаковке изготовителя следует хранить в соответствии с требованиями ГОСТ 10581 (раздел 4) на расстоянии не менее 1 метра от нагревательных и отопительных приборов, в защищенном от воздействия прямых солнечных лучей месте.

4.3 Необходимо обеспечить изоляцию изделия от воздействия агрессивных веществ (йод, щелочи, смазочные масла и т.д.).

5 Утилизация

Утилизация изделия должна осуществляться в соответствии с правилами, предусмотренными СанПиН 2.1.3684 –21, в зависимости от условий эксплуатации.

6 Гарантийные обязательства

6.1 Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев при соблюдении рекомендаций по хранению и уходу.

6.2 Изготовитель не несёт ответственности в течение гарантийного срока эксплуатации в случаях:

- механических повреждений изделий при перевозке и хранении;
- ненадлежащего их использования;
- неисправностей, вызванных климатическими воздействиями;
- доработки изделий потребителем (изменений конструкции).

Изделие произведено и принято в соответствии с действующей нормативной и технической документацией и признано годным к эксплуатации.

Дата изготовления _____

Штамп ОТК _____

Произведено в России.

ПАСПОРТ

Чехол-куртка для инв. коляски, демисезонный, КОС®

1 Основные сведения об изделии

1.1 Назначение

Изделие предназначено для прогулок людям, передвигающимся на инвалидных колясках. Утепленный мешок дополняет или полностью заменяет верхнюю одежду, позволяя людям с ограниченными возможностями находиться на свежем воздухе в дождливую погоду и холодное время года. Он защищает от ветра, дождя и мокрого снега.

1.2 Технические характеристики изделия

Размер	M 155-170	L 155-170	XL 155-170	2XL 155-170	M 170-185	L 170-185	XL 170-185	2XL 170-185
Соответствие российскому размеру	44-48	50-54	56-60	62-66	44-48	50-54	56-60	62-66
Артикул	ADW034R_LBM	ADW034R_LBL	ADW034R_LBXL	ADW043R_LB2XL	ADW037R_LBM	ADW037R_LBL	ADW037R_LBXL	ADW044R_LB2XL
								
Цвет	Голубой							
	ADW034R_RDM	ADW034R_RDL	ADW034R_RDXL	ADW043R_RD2XL	ADW037R_RDM	ADW037R_RDL	ADW037R_RDXL	ADW044R_RD2XL
								
	Бордо							
Материалы	100% пэ							

2 Комплект поставки

- чехол-куртка для инв. коляски, демисезонный – 1 шт. (размер и ростовка изделия отмечены в п.1.2),
- паспорт изделия с инструкцией по эксплуатации – 1 шт.

3 Упаковка

Изделие упаковывается в индивидуальный полиэтиленовый пакет по ГОСТ 12302. Далее изделие в индивидуальной упаковке помещается в транспортную тару — ящики из гофрированного картона по ГОСТ 9142.

4 Условия транспортировки и хранения

4.1 Транспортирование и хранение изделия осуществляется в соответствии с требованиями ГОСТ 10581 (раздел 3).

4.2 Изделие в упаковке изготовителя следует хранить в соответствии с требованиями ГОСТ 10581 (раздел 4) на расстоянии не менее 1 метра от нагревательных и отопительных приборов, в защищенном от воздействия прямых солнечных лучей месте.

4.3 Необходимо обеспечить изоляцию изделия от воздействия агрессивных веществ (йод, щелочи, смазочные масла и т.д.).

5 Утилизация

Утилизация изделия должна осуществляться в соответствии с правилами, предусмотренными СанПиН 2.1.3684 –21, в зависимости от условий эксплуатации.

6 Гарантийные обязательства

6.1 Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев при соблюдении рекомендаций по хранению и уходу.

6.2 Изготовитель не несёт ответственности в течение гарантийного срока эксплуатации в случаях:

- механических повреждений изделий при перевозке и хранении;
- ненадлежащего их использования;
- неисправностей, вызванных климатическими воздействиями;
- доработки изделий потребителем (изменений конструкции).

Изделие произведено и принято в соответствии с действующей нормативной и технической документацией и признано годным к эксплуатации.

Дата изготовления _____

Штамп ОТК _____

Произведено в России.

Чехол-куртка для инв. коляски, демисезонный, КОС®**1 Описание и работа изделия****1.1 Конструкция**


Изделие утепленное, прямого силуэта, с капюшоном и втачными рукавами, оснащенными вязаными внутренними манжетами. На передней части изделия расположены накладные карманы. На уровне груди и лопаток, а также на рукавах выше локтя, расположена светоотражающая лента. В нижней части изделия расположено дно, что придает изделию сходство со спальным мешком. Утепленный мешок застегивается спереди на центральную молнию, проходящую от дна до верхней части воротника. Молния прикрыта ветрозащитной планкой, застегивающейся на кнопки. Для увеличения объема предусмотрена дополнительная вставка, прикрепляемая к изделию по центру спереди при помощи молний.

1.2 Подбор размера

Для обеспечения комфортной эксплуатации важно правильно подобрать размер изделия.

Размер определяется по следующим параметрам:

Маркировка размера	Соответствие российскому размеру	Рост		Обхват груди, см	Обхват талии, см	Обхват бедер, см
M	44-48	155-170	170-185	88-96	78-86	92-100
L	50-54	155-170	170-185	100-108	90-100	104-112
XL	56-60	155-170	170-185	112-120	106-118	116-124
2XL	62-66	155-170	170-185	124-132	124-136	128-136

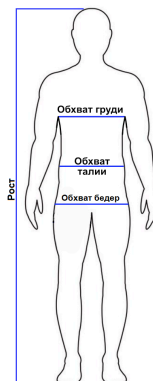**2 Меры предосторожности**

2.1 Запрещается вносить какие-либо изменения в конструкцию изделия.

2.2 Перед каждым использованием необходимо проверять целостность изделия для безопасной эксплуатации.

2.3 Запрещается применение изделия при:


- загрязнении биологическими или химическими веществами, несущими опасность здоровью человека;
- индивидуальной непереносимости материалов изделия.

3 Инструкция по использованию

1. Расстегните молнию на изделии до конца и разложите его на кресле-коляске.
2. Посадите подопечного в кресло-коляску, поставьте его ступни на дно мешка.
3. Проденьте руки подопечного в рукава изделия.
4. Застегните центральную молнию и ветрозащитную планку.
5. Отрегулируйте утяжку на капюшоне.
6. Расправьте изделие, следя за тем, чтобы на спине и под ягодицами подопечного не образовывались складки и изделие не перекручивалось.

4 Правила ухода за изделием

Машинная стирка при температуре до 30 °С, на деликатном режиме. Отжим на минимальных оборотах. Не отбеливать. Не гладить. Химическая чистка запрещена.

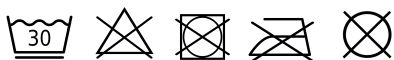

Более подробную информацию о данном изделии можно узнать на нашем сайте: tmkos.ru
Если у Вас возникли вопросы, свяжитесь с нами.
Здоровья Вам и Вашим близким!

Чехол-куртка для инв. коляски, демисезонный, КОС®**1 Описание и работа изделия****1.1 Конструкция**

Изделие утепленное, прямого силуэта, с капюшоном и втачными рукавами, оснащенными вязаными внутренними манжетами. На передней части изделия расположены накладные карманы. На уровне груди и лопаток, а также на рукавах выше локтя, расположена светоотражающая лента. В нижней части изделия расположено дно, что придает изделию сходство со спальным мешком. Утепленный мешок застегивается спереди на центральную молнию, проходящую от дна до верхней части воротника. Молния прикрыта ветрозащитной планкой, застегивающейся на кнопки. Для увеличения объема предусмотрена дополнительная вставка, прикрепляемая к изделию по центру спереди при помощи молний.

1.2 Подбор размера

Для обеспечения комфортной эксплуатации важно правильно подобрать размер изделия.

Размер определяется по следующим параметрам:

Маркировка размера	Соответствие российскому размеру	Рост		Обхват груди, см	Обхват талии, см	Обхват бедер, см
M	44-48	155-170	170-185	88-96	78-86	92-100
L	50-54	155-170	170-185	100-108	90-100	104-112
XL	56-60	155-170	170-185	112-120	106-118	116-124
2XL	62-66	155-170	170-185	124-132	124-136	128-136

**2 Меры предосторожности**

2.1 Запрещается вносить какие-либо изменения в конструкцию изделия.

2.2 Перед каждым использованием необходимо проверять целостность изделия для безопасной эксплуатации.

2.3 Запрещается применение изделия при:

- загрязнении биологическими или химическими веществами, несущими опасность здоровью человека;
- индивидуальной непереносимости материалов изделия.

3 Инструкция по использованию

7. Расстегните молнию на изделии до конца и разложите его на кресле-коляске.
8. Посадите подопечного в кресло-коляску, поставьте его ступни на дно мешка.
9. Проденьте руки подопечного в рукава изделия.
10. Застегните центральную молнию и ветрозащитную планку.
11. Отрегулируйте утяжку на капюшоне.
12. Расправьте изделие, следя за тем, чтобы на спине и под ягодицами подопечного не образовывались складки и изделие не перекручивалось.

4 Правила ухода за изделием

Машинная стирка при температуре до 30 °С, на деликатном режиме. Отжим на минимальных оборотах. Не отбеливать. Не гладить. Химическая чистка запрещена.



Более подробную информацию о данном изделии можно узнать на нашем сайте: tmkos.ru
Если у Вас возникли вопросы, свяжитесь с нами.
Здоровья Вам и Вашим близким!