

ПАСПОРТ

Чехол для инвалидной. коляски, меховой

1. Общие сведения об изделии:

- 1.1. **Наименование:** Чехол утепленный меховой для инвалидной коляски
1.2. **Назначение:** Утепленный, водонепроницаемый чехол для инвалидных колясок предназначен для прогулок в холодную, дождливую и снежную погоду. Чехол для инвалидов-колясочников дополняет верхнюю одежду - позволяет людям с ограниченными возможностями находиться на свежем воздухе в дождливую погоду и холодное время года, защищая от ветра, дождя и мокрого снега.

2. Технические характеристики изделия

2.1. Основные параметры изделия:

Размер	детский	S-M	L-XL	2XL-3XL
Соответствие российскому размеру		44-48	50-54	56-60
Артикул Цвет	ADW040R_DB 	ADW038R_DBSM 	ADW038R_DBLXL 	ADW045R_DB2XL3XL 
	Темно-синий			
	ADW040R_RD 	ADW038R_RDSM 	ADW038R_RDLXL 	ADW045R_RD2XL3XL 
Бордовый				
Материалы	100% полиэстер			

2.2. Сведения об упаковке и маркировке:

- чехол утепленный меховой для инвалидов-колясочников – 1 шт;
- паспорт изделия с инструкцией по эксплуатации – 1 шт.
- 2.2.2 Изделие упаковывается в индивидуальный полиэтиленовый zip-пакет. Транспортная упаковка – картонные коробки.

3. Меры предосторожности

- 3.1. Запрещается вносить какие-либо изменения в конструкцию изделия.
3.2. Перед каждым использованием необходимо проверять целостность изделия для безопасной эксплуатации.
3.3. Запрещается применение изделия при:
- имеющихся повреждениях кожи в области наложения изделия;
- загрязнении биологическими или химическими веществами, несущими опасность здоровью человека;
- индивидуальной непереносимости материалов изделия.

4. Условия транспортировки

- 4.1. Изделия должны транспортироваться в крытых транспортных средствах. Не допускается попадание атмосферных осадков на упаковку с продукцией во время транспортировки и хранения.
4.2. Хранение в сухих чистых помещениях при температуре от +5 °C до +40 °C и относительной влажности воздуха не более 75%.

5. Гарантийные обязательства

- 5.1 Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня продажи.
5.2 Изготовитель не несет ответственность в течение гарантийного срока эксплуатации в случаях:
- механических повреждений изделий при перевозке и хранении;
- ненадлежащего их использования;
- неисправностей, вызванных климатическими воздействиями;
- доработки изделий потребителем (изменений конструкции).

Изделие принято и признано годным к эксплуатации.

Дата изготовления _____

Штамп ОТК _____

Произведено в России

ПАСПОРТ

Чехол для инвалидной. коляски, меховой

1. Общие сведения об изделии:

- 1.1. **Наименование:** Чехол утепленный меховой для инвалидной коляски
1.2. **Назначение:** Утепленный, водонепроницаемый чехол для инвалидов-колясочников предназначен для прогулок в холодную, дождливую и снежную погоду. Чехол для инвалидов-колясочников дополняет верхнюю одежду - позволяет людям с ограниченными возможностями находиться на свежем воздухе в дождливую погоду и холодное время года, защищая от ветра, дождя и мокрого снега.

2. Технические характеристики изделия

2.1. Основные параметры изделия:

Размер	детский	S-M	L-XL	2XL-3XL
Соответствие российскому размеру		44-48	50-54	56-60
Артикул Цвет	ADW040R_DB 	ADW038R_DBSM 	ADW038R_DBLXL 	ADW045R_DB2XL3XL 
	Темно-синий			
	ADW040R_RD 	ADW038R_RDSM 	ADW038R_RDLXL 	ADW045R_RD2XL3XL 
Бордовый				
Материалы	100% полиэстер			

2.2. Сведения об упаковке и маркировке:

- чехол утепленный меховой для инвалидов-колясочников – 1 шт;
- паспорт изделия с инструкцией по эксплуатации – 1 шт.
- 2.2.2 Изделие упаковывается в индивидуальный полиэтиленовый zip-пакет. Транспортная упаковка – картонные коробки.

3. Меры предосторожности

- 3.1. Запрещается вносить какие-либо изменения в конструкцию изделия.
3.2. Перед каждым использованием необходимо проверять целостность изделия для безопасной эксплуатации.
3.3. Запрещается применение изделия при:
- имеющихся повреждениях кожи в области наложения изделия;
- загрязнении биологическими или химическими веществами, несущими опасность здоровью человека;
- индивидуальной непереносимости материалов изделия.

4. Условия транспортировки

- 4.1. Изделия должны транспортироваться в крытых транспортных средствах. Не допускается попадание атмосферных осадков на упаковку с продукцией во время транспортировки и хранения.
4.2. Хранение в сухих чистых помещениях при температуре от +5 °C до +40 °C и относительной влажности воздуха не более 75%.

5. Гарантийные обязательства

- 5.1 Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня продажи.
5.2 Изготовитель не несет ответственность в течение гарантийного срока эксплуатации в случаях:
- механических повреждений изделий при перевозке и хранении;
- ненадлежащего их использования;
- неисправностей, вызванных климатическими воздействиями;
- доработки изделий потребителем (изменений конструкции).

Изделие принято и признано годным к эксплуатации.

Дата изготовления _____
Произведено в России

Штамп ОТК _____


ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ЧЕХОЛ УТЕПЛЕННЫЙ МЕХОВОЙ ДЛЯ ИНВАЛИДНОЙ КОЛЯСКИ

Конструкция. Изделие является аналогом спального мешка. Эргономичность и удобство чехла достигается тем, что его конструкция разрабатывалась для комфорта сидящего человека - . Изделие конструктивно состоит из передней, задней и боковых частей, утепленных изнутри экомехом. Передняя часть полностью раскрывается благодаря застежке на 2 молнии с пуллерами. Задняя часть (спинка) - цельнокроеная с дном чехла. В верхней части спинки расположены резиновые петли (или паты с лентой велкро вместо резиновых петель для детских чехлов), на уровне поясицы располагается ремень из стропы с двумя регулировочными рамками с застежкой на фастекс. По верхнему краю предусмотрена меховая оторочка со вставленным в нее шнуром для регулировки прилегания чехла.

Подбор размера.

Для обеспечения комфортной эксплуатации важно правильно подобрать размер изделия. Размер определяется по следующим параметрам:

Маркировка размера	Соответствие российскому размеру	Обхват груди, см	Обхват талии, см	Обхват бедер, см
S-M	44-48	88-96	78-86	92-100
L-XL	50-54	100-108	90-100	104-112
2XL-3XL	56-60	112-120	106-118	116-124

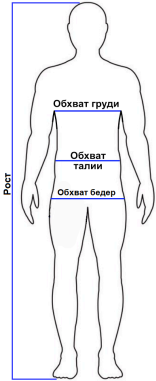


Маркировка размера	Рост	Обхват груди, см	Обхват талии, см	Обхват бедер, см
Детский	130-150	64-76	58-65	69-83

Инструкция по использованию.

1. Расположите чехол в инвалидном кресле, надев резиновые петли на рукоять коляски.
2. Расстегните замки-молнии.
3. Усадите человека в кресло и застегните чехол, потянув за пуллеры, расположенные на бегунках молнии.
4. При необходимости, затяните шнур в верхней части чехла.

Хранение и уход. Регулярно чистить изделие мягкой ворсистой щеткой и теплой водой без использования моющих средств. Можно подвергать машинной стирке при 40 °С в режиме бережной стирки. После стирки необходимо одежду тщательно прополоскать. Отжим на минимальных оборотах. Не гладить. Не использовать химические растворители и очистители. Не применять хлорсодержащие вещества и оптические отбеливатели.

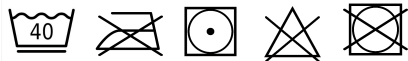

**Если у Вас возникли вопросы, свяжитесь с нами. Наш сайт tmkos.ru
Здоровья Вам и Вашим близким!**

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ЧЕХОЛ УТЕПЛЕННЫЙ МЕХОВОЙ ДЛЯ ИНВАЛИДНОЙ КОЛЯСКИ

Конструкция. Изделие является аналогом спального мешка. Эргономичность и удобство чехла достигается тем, что его конструкция разрабатывалась для комфорта сидящего человека - . Изделие конструктивно состоит из передней, задней и боковых частей, утепленных изнутри экомехом. Передняя часть полностью раскрывается благодаря застежке на 2 молнии с пуллерами. Задняя часть (спинка) - цельнокроеная с дном чехла. В верхней части спинки расположены резиновые петли (или паты с лентой велкро вместо резиновых петель для детских чехлов), на уровне поясицы располагается ремень из стропы с двумя регулировочными рамками с застежкой на фастекс. По верхнему краю предусмотрена меховая оторочка со вставленным в нее шнуром для регулировки прилегания чехла.

Подбор размера.

Для обеспечения комфортной эксплуатации важно правильно подобрать размер изделия. Размер определяется по следующим параметрам:




Маркировка размера	Соответствие российскому размеру	Обхват груди, см	Обхват талии, см	Обхват бедер, см
S-M	44-48	88-96	78-86	92-100
L-XL	50-54	100-108	90-100	104-112
2XL-3XL	56-60	112-120	106-118	116-124

Маркировка размера	Рост	Обхват груди, см	Обхват талии, см	Обхват бедер, см
Детский	130-150	64-76	58-65	69-83

Инструкция по использованию.

1. Расположите чехол в инвалидном кресле, надев резиновые петли на рукоять коляски.
2. Расстегните замки-молнии.
3. Усадите человека в кресло и застегните чехол, потянув за пуллеры, расположенные на бегунках молнии.
4. При необходимости, затяните шнур в верхней части чехла.

Хранение и уход. Регулярно чистить изделие мягкой ворсистой щеткой и теплой водой без использования моющих средств. Можно подвергать машинной стирке при 40 °С в режиме бережной стирки. После стирки необходимо одежду тщательно прополоскать. Отжим на минимальных оборотах. Не гладить. Не использовать химические растворители и очистители. Не применять хлорсодержащие вещества и оптические отбеливатели.

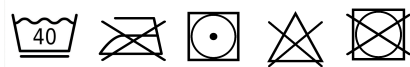

**Если у Вас возникли вопросы, свяжитесь с нами. Наш сайт tmkos.ru
Здоровья Вам и Вашим близким!**