

ПАСПОРТ

Борт-ограничитель для кровати, КОС®

1. Назначение. Приспособление для ограничения перемещений человека (во сне или при нарушении когнитивных функций) любого возраста за пределы кровати и предотвращения падений на пол.

2. Технические характеристики

Артикул	ADF051R
Размеры изделия, Д*Ш*В, мм	701*332*478 (±30)
Максимальный вес пользователя (приблизительно), кг	217
Вес изделия, г	1760 (±140)

QR-код, ссылка на страницу товара на сайте производителя.

3. Сведения об упаковке и маркировке:

- 3.1. Комплект поставки
- борт-ограничитель для кровати – 1 шт.,
- стропа-ремень с фастексом (для крепления борта к кровати) – 1 шт.,
- паспорт – 1 шт.

3.2. Изделие упаковывается в индивидуальную коробку и/или пакет.

Транспортная упаковка – картонные коробки.

4. Меры предосторожности

Соблюдайте осторожность, наклоняясь в стороны при использовании изделия (так как изделие не закрепляется на кровати, возможны опрокидывания).

5. Условия транспортировки

5.1. Изделия должны транспортироваться в крытых транспортных средствах. Не допускается попадание атмосферных осадков на упаковку с продукцией во время транспортировки и хранения.

5.2. Хранить в сухих чистых помещениях при температуре от 5° С до 40° С и относительной влажности воздуха не более 75%.

6. Гарантийные обязательства

6.1 Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня продажи.

6.2 Изготовитель не несет ответственности в течение гарантийного срока эксплуатации в случаях:

- механических повреждений изделий при перевозке и хранении;
- ненадлежащего их использования;
- неисправностей, вызванных климатическими воздействиями;
- доработки изделий потребителем (изменений конструкции).

6.3 Производитель оставляет за собой право вносить изменения в изделие без уведомления конечного пользователя.

Утилизация

Утилизация должна осуществляться в соответствии с правилами сбора, учета и утилизации, установленными уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, предусмотренным СанПиН 2.1.3684.

Изделие принято и признано годным к эксплуатации.

Дата изготовления _____

Штамп ОТК _____

Производитель: ООО «КОС».

Страна производства: Россия.

ПАСПОРТ

Борт-ограничитель для кровати, КОС®

1. Назначение. Приспособление для ограничения перемещений человека (во сне или при нарушении когнитивных функций) любого возраста за пределы кровати и предотвращения падений на пол.

2. Технические характеристики

Артикул	ADF051R
Размеры изделия, Д*Ш*В, мм	701*332*478 (±30)
Максимальный вес пользователя (приблизительно), кг	217
Вес изделия, г	1760 (±140)

QR-код, ссылка на страницу товара на сайте производителя.

3. Сведения об упаковке и маркировке:

- 3.1. Комплект поставки
- борт-ограничитель для кровати – 1 шт.,
- стропа-ремень с фастексом (для крепления борта к кровати) – 1 шт.,
- паспорт – 1 шт.

3.2. Изделие упаковывается в индивидуальную коробку и/или пакет.

Транспортная упаковка – картонные коробки.

4. Меры предосторожности

Соблюдайте осторожность, наклоняясь в стороны при использовании изделия (так как изделие не закрепляется на кровати, возможны опрокидывания).

5. Условия транспортировки

5.1. Изделия должны транспортироваться в крытых транспортных средствах. Не допускается попадание атмосферных осадков на упаковку с продукцией во время транспортировки и хранения.

5.2. Хранить в сухих чистых помещениях при температуре от 5° С до 40° С и относительной влажности воздуха не более 75%.

6. Гарантийные обязательства

6.1 Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня продажи.

6.2 Изготовитель не несет ответственности в течение гарантийного срока эксплуатации в случаях:

- механических повреждений изделий при перевозке и хранении;
- ненадлежащего их использования;
- неисправностей, вызванных климатическими воздействиями;
- доработки изделий потребителем (изменений конструкции).

6.3 Производитель оставляет за собой право вносить изменения в изделие без уведомления конечного пользователя.

Утилизация

Утилизация должна осуществляться в соответствии с правилами сбора, учета и утилизации, установленными уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, предусмотренным СанПиН 2.1.3684.

Изделие принято и признано годным к эксплуатации.

Дата изготовления _____

Штамп ОТК _____


Производитель: ООО «КОС».

Страна производства: Россия.

Инструкция крепления борта к кровати с помощью ремня (из комплекта поставки).

Освободите кровать от матраса и пр. и установите борт в удобное для Вас место (приблизительно посередине длины кровати - или в районе поясницы лежащего в кровати человека)

Следуйте рекомендациям в рисунках.

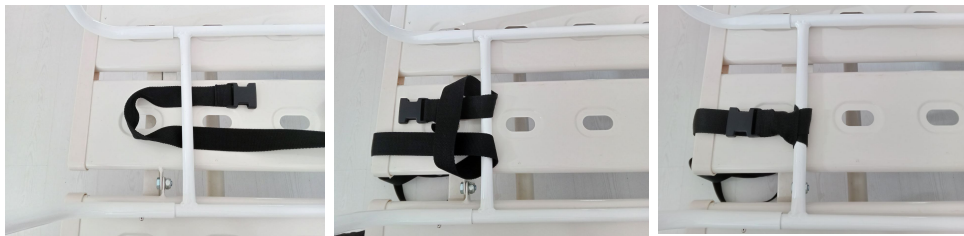

После - пропустите ремень под кроватью и закрепите заднюю часть борта, следуя рисункам.



Пропустите ремень с защелкой под кроватью (получается, что изначально мы пропустили его под кроватью, обернули вокруг задней части рамы борта и теперь пропускаем под кроватью обратно).




Защёлкните фастекс и затяните ремень (потянув за свободный конец стропы/ремня).

Инструкция крепления борта к кровати с помощью ремня (из комплекта поставки).

Освободите кровать от матраса и пр. и установите борт в удобное для Вас место (приблизительно посередине длины кровати - или в районе поясницы лежащего в кровати человека)

Следуйте рекомендациям в рисунках.

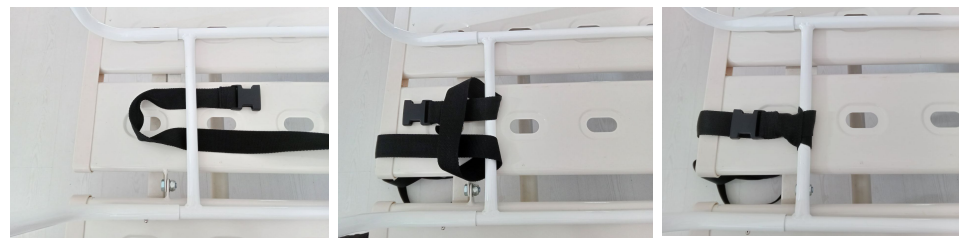

После - пропустите ремень под кроватью и закрепите заднюю часть борта, следуя рисункам.



Пропустите ремень с защелкой под кроватью (получается, что изначально мы пропустили его под кроватью, обернули вокруг задней части рамы борта и теперь пропускаем под кроватью обратно).



Защёлкните фастекс и затяните ремень (потянув за свободный конец стропы/ремня).