


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Фиксаторы-ремни для жесткой фиксации с элементами из кожи, КОС®

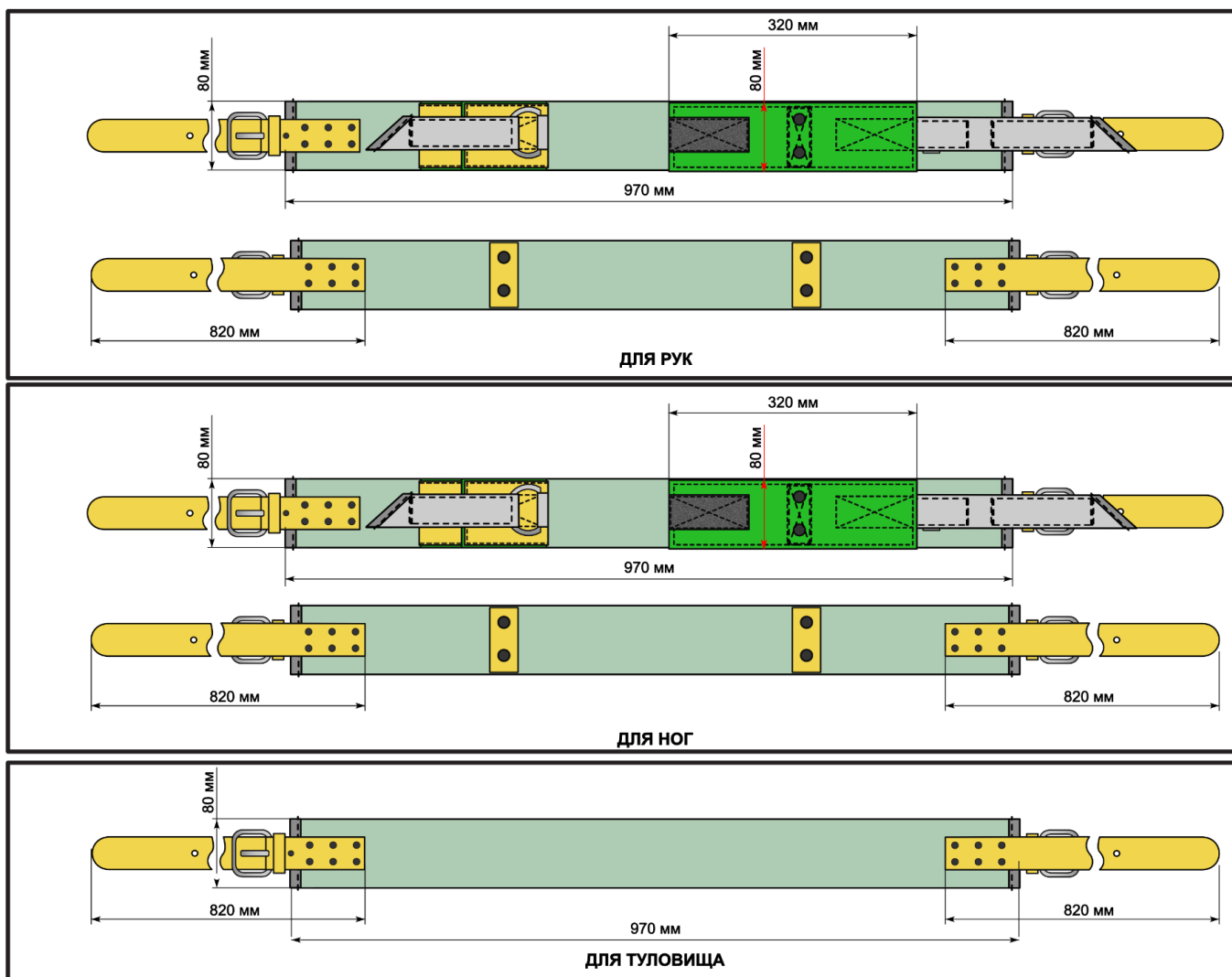

Ремни предназначены для физического стеснения подопечного, способного неосознанно причинить вред собственному здоровью, окружающим (другим больным, медицинскому персоналу) и нарушить лечебно-охранительный режим ЛПУ.

Рекомендуются в качестве вспомогательного средства для оказания помощи людям, страдающим острыми расстройствами поведения (реактивными психозами).

Ремни предназначены для удерживания человека в плоскости кровати. В отличие от традиционных способов фиксации человека с помощью бинтов и простыней, изделие обладает высокой надежностью, позволяет минимизировать риски травматизма, нарушения трофики тканей, вызванной чрезмерным сдавливанием.

ПАРАМЕТРЫ ИЗДЕЛИЯ*:

<u>Наименование показателя</u>	<u>Значение</u>		
Конструкция фиксаторов-ремней для рук и ног	Изделие представляет собой широкую плотную ремennую ленту повышенной прочности с нашитыми на неё манжетами. Манжеты с внешней стороны выполнены из прочной толстой кожи, внутренние части манжет – из влагостойкого текстильного материала со смягчающей прокладкой на весь размер манжеты. Манжета закрепляется на ленте-основе двойной ниточной закрепкой типа “домик”, внутри которой на расстоянии 1,5 см от края манжеты установлены хольнитены с дополнительным усилением из полоски кожи с изнаночной стороны изделия под хольнитенами. Манжеты снабжены широкими ремнями из прочной ремennой ленты, продеваемыми через металлические полукольца с внутренней стороны манжеты и застёгивающимися на липучку. Срезы лент ремней и ленты-основы предварительно опалены и обработаны окантовкой. На концах ленты-основы имеются кожаные ремни с отверстиями для регулировки, закрепленные 3-мя рядами хольнитенов, с застёжкой на металлические пряжки.		
Конструкция фиксатора-ремня для туловища	Изделие представляет собой широкую плотную ремennую ленту повышенной прочности. Срезы ленты предварительно опалены и обработаны окантовкой. На концах ленты-основы расположены кожаные ремни с отверстиями для регулировки, закрепленные 3-мя рядами хольнитенов, с застёжкой на металлические пряжки.		
Кожа	кожа шорно-седельная (ГОСТ 194-81) толщиной 3 мм		
Материал внешнего слоя манжет для конечностей	100% полиэстер, покрытие - полиуретан, плотность - 100 г/м ²		
Амортизирующая прокладка для манжет	полиэтиленовый пенопласт плотностью 45 кг/м ³		
Лента-основа	ширина 80 мм и толщина 3мм, разрывная нагрузка - 4300 кгс, комбинированного переплетения		
Стропа ремней для манжет	ширина 45 мм, полипропилен, толщина 1,6 мм, разрывная нагрузка - 2700 кгс, комбинированного переплетения		
Металлические полукольца для манжет	ширина 50 мм, толщина металла - 5 мм		
Металлические роликовые пряжки для кожаных ремней	ширина 30 мм, толщина металла - 5 мм		
Хольнитены	металл, диаметр 10 мм, высота ножки - 10 мм		
Нитки	армированные нитки 70ЛЛ и 100ЛЛ		
Вид (назначение)	Ремень для рук	Ремень для ног	Ремень для туловища
Артикул	FXB020R	FXB021R	FXB022R

Длина ленты-основы, мм	970	970	970
Размеры манжеты (ДхШ), мм	320x80	390x80	-
Размеры кожаной накладки на манжету (ДхШ), мм	300x70	370x70	-
Размеры ремней из стропы на манжете (ДхШ) мм	390x50	460x50	-
Расстояние между манжетами на ленте-основе, мм	650	360	-
Размеры кожаных ремней для фиксации к раме кровати с каждой стороны (ДхШ), мм	820x30	820x30	820x30
Количество регулировочных отверстий на кожаных ремнях для фиксации к раме кровати с каждой стороны, шт	10	10	10
Количество хольнитенов для крепления кожаных ремней к ленте-основе с каждой стороны, шт.	6	6	6
Количество хольнитенов для крепления пряжек к кожаным ремням с каждой стороны, шт.	2	2	2
Вес НЕТТО, г	510	550	305

***Допустимые отклонения габаритных размеров и массы $\pm 10\%$.**

Комплекты поставки:

- Фиксатор-ремень для жесткой фиксации с элементами из кожи, для рук, на ленте , в сумке из нетканого материала;
- Фиксатор-ремень для жесткой фиксации с элементами из кожи, для ног, на ленте , в сумке из нетканого материала;
- Фиксатор-ремень для жесткой фиксации с элементами из кожи, для туловища, на ленте , в сумке из нетканого материала;

- Фиксаторы-ремни для жесткой фиксации с элементами из кожи, для рук и ног, на ленте, в сумке из нетканого материала;
- Фиксаторы-ремни для жесткой фиксации с элементами из кожи, для рук, ног и туловища, на ленте, в сумке из нетканого материала;

Рекомендации по уходу:

Ремни можно подвергать ручной стирке при температуре 40°, сушить в расправленном виде, не гладить. При уходе не использовать хлорсодержащие вещества.



Производитель: ООО " КОС "

Страна производства: Россия