


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Столик для инвалидной коляски, КОС®

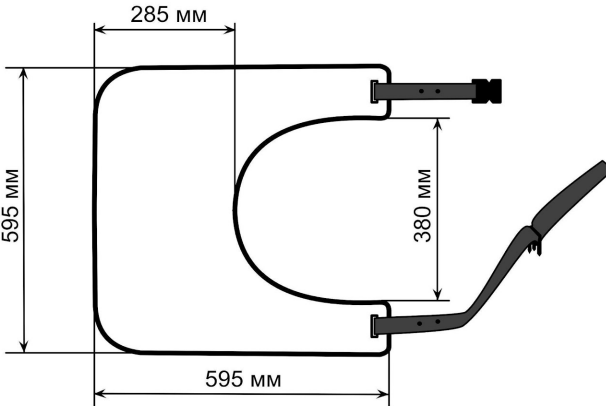

Съемный столик для инвалидного кресла-коляски выполняет функцию опорной поверхности при ежедневном приеме пищи, чтении, рисовании, работе с ноутбуком и других занятиях. Также столик может выступать в роли подноса: с его помощью можно перевозить предметы небольших габаритных размеров, например посуду, книги и т.д.

Параметры изделия:

Наименование показателя	Значение
Конструкция 	Изделие представляет собой плоскую плиту из ламинированной фанеры с округлой выемкой, образующей пространство для сидящего в кресле человека. Выемка условно разделяет изделие на столешницу и два подлокотника. В прорезях подлокотников столешницы закреплен ремень из усиленной стропы с застежкой на пряжку-фастекс для надежной фиксации столика за спинкой коляски. К столику дополнительно прилагаются съемные фиксирующие ремни, застегивающиеся на липучку.
Основной материал столешницы	Фанера (композитный материал из клееного березового шпона) с двухсторонним ламинированием
Размеры столешницы, мм	длина – 595; ширина – 595; толщина – 9
Ширина рабочей части столешницы, мм	285
Стропа ремня столешницы	ширина – 40 мм, полипропилен, разрывная нагрузка – 2000 Н
Фастекс	ширина – 38 мм, полиацеталь
Размеры ремня на столешнице, мм	длина концов – 221 и 700; ширина – 40
Стропа съемных ремней	ширина – 50 мм, полипропилен, разрывная нагрузка – 3000 Н
Велкро	ширина – 50 мм, нейлон
Размеры съемных ремней для фиксации с двух сторон, мм	длина – 370; ширина – 50
Вес НЕТТО, г	1800 (±50)
Цвет	Венге (тёмно коричневый)

Рекомендации по уходу:

- Столик рекомендуется эксплуатировать в помещении с температурой воздуха не ниже +10 °С и относительной влажностью воздуха 60-70%.
- Беречь от длительного воздействия прямых солнечных лучей.
- Не хранить вблизи отопительных приборов, не нагревать, беречь от огня!
- Не мочить. При попадании жидкости на поверхность – протереть сухой салфеткой. Следует особенно оберегать торцы изделия от попадания жидкостей.
- При загрязнении протереть влажной тряпкой. Не использовать абразивные моющие средства, щетки и металлические мочалки.

Производитель: ООО "КОС"

Страна производства: Россия