

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Подушка для переворачивания, КОС®





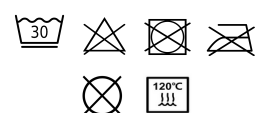
Изделие предназначено для эффективной работы персонала - удобного и безопасного переворачивания на кровати людей с ограниченной подвижностью для проведения лечебных и гигиенических процедур, процедур по уходу.

Подушка может быть использована как одно из средств позиционирования частей тела лежачего пациента.

Полезной функцией подушки является возможность удерживать положение тела пациента, при котором появляется доступ к области промежности, что облегчает проведение гигиенических процедур.

Параметры изделия*:

Наименование показателя	Значение		
Конструкция	Подушка для переворачивания формой напоминает “трезубец”, между “зубцами” которого находятся выемки для ног пациента. Нижняя часть закруглена. Средний “зубец” имеет каплевидное утолщение на конце и имеет увеличенную относительно боковых сторон ширину и длину, это служит для фиксации ног пациента. Чехол съемный (с застёжкой на молнию), полностью повторяет форму изделия. На внешних сторонах “зубцов” в верхней части предусмотрены ручки, изготовленные из того же материала, что и чехол.		
Артикул	PZN026R	PZN078R	PZN079R

Материал чехла	Искусственная кожа на трикотажной основе с ПВХ покрытием: ПВХ – 83%, полиэстер – 17%, плотность материала – 510 (±50) г/м²	ПВХ искусственная кожа – 100% полиэфир с ПУ покрытием, поверхностная плотность материала – 320 г/м²	ПВХ искусственная кожа, верхняя сторона- ПВХ покрытие, нижняя сторона- трикотажная основа 100 % ПЭ 500 г/м²
Наполнитель	Эластичный пенополиуретан повышенной жесткости EL3245		
Нитки	45 ЛЛ		
Элемент фиксации чехла	Витая молния Т5		
Размеры изделия, мм	Ширина – 500; толщина – 150; высота – 420; высота вместе со средней частью – 455		
Размеры выемки для ноги, мм	Высота – 230; ширина – 155		
Размер боковых зубцов, мм	Длина – 230; ширина – 60		
Размер среднего зубца, мм	Длина – 275; ширина в нижней части – 70		
Вес нетто, г	1,02	0,86	0,96
Цвет	Голубой	Морская волна	Морская волна
<u>Рекомендация по уходу</u>	Протирание мыльным раствором без содержания абразивных веществ. Допустима дезинфекция 1%-ным раствором хлорамина. Не стирать. Не гладить.	Чехол можно подвергать машинной стирке при температуре до 30 °С, на деликатном режиме без отжима. Допустима обработка хлорсодержащим и препаратами с минимальной концентрацией. Не гладить. Химическая чистка запрещена.	Чехол можно подвергать машинной стирке при температуре до 30 °С, на деликатном режиме без отжима. Дезобработка возможна дезинфицирующими средствами, хлорсодержащим дезинфицирующим средством либо спиртосодержащим дез.средством. Не гладить. Возможна стерилизация паром при 120 С
<u>Символы по уходу</u>			



ООО «Компания Открытых Систем»

Тел.: 8 (495) 775-80-27

Email: medfix@mail.ru

Сайт: tmkos.ru

***Допустимые отклонения габаритных размеров и массы $\pm 10\%$.**

Производитель: ООО «КОС»

Страна производства Россия