

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

### Веревочная лестница в кровать, для больного, с пластиковыми перекладинами, КОС<sup>®</sup>



Изделие используется в качестве вспомогательного средства во время самостоятельного перемещения в кровати человека с ограниченными возможностями опорно-двигательного аппарата.

Веревочная лестница может использоваться для проведения различных комплексов реабилитационных упражнений, которые помогают укрепить мышцы рук и плечевого пояса.


#### **Параметры изделия\*:**

<u>Наименование показателя</u>	<u>Значение</u>
<b>Артикул</b>	<b>REN005R</b>
<b>Конструкция</b>	Изделие представляет собой лестницу из ременной ленты повышенной прочности с 4-мя жесткими перекладинами из пластиковой трубы. Перекладины расположены на одинаковом расстоянии. Концы лестницы снабжены пряжками-фастексами для фиксации изделия на кровати. Крепежные элементы позволяют фиксировать изделие на разных конструкциях кровати.
<b>Ременная лента</b>	полипропилен, ширина - 25 мм, разрывная нагрузка - 153 кгс, комбинированное переплетение
<b>Перекладины</b>	полипропиленовая труба диаметром 25мм, толщина материала 3,9 мм
<b>Фастексы</b>	рабочая ширина - 25 мм, полиацеталь
<b>Нитки</b>	70 ЛЛ
<b>Длина изделия, мм</b>	2000
<b>Ширина изделия, мм</b>	280
<b>Рабочая ширина, мм</b>	200
<b>Количество перекладин, шт.</b>	4
<b>Диаметр перекладин, мм</b>	25
<b>Расстояние между перекладинами, мм</b>	145
<b>Длина свободного конца лестницы (от фастекса), мм</b>	1080
<b>Вес НЕТТО, г/шт</b>	145
<b>Цвет</b>	черно-белый

**\* Допустимые отклонения габаритных размеров и массы  $\pm 10\%$**

**Рекомендации по уходу:**

Протирание мыльным раствором/дезинфицирующим средством по мере загрязнения.  
Сушить в расправленном виде. Не гладить. Запрещено отбеливание, химическая чистка.

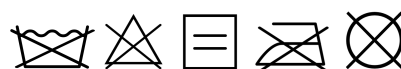

Производитель: ООО " КОС "

Страна производства: Россия